應用手冊 No. 033 P 1

產品: 麵包屑

目標: 使用探棒壓縮法測量麵包屑的硬度

動作模式:壓縮測試

### 測試模式:


速度	測試模式	啟點	目標	延遲
1.7 mm/s	距離(壓)	10 gf	6.2 mm	0 sec


# 配件:

直徑 25mm 柱形探頭(壓克力)、測試台

# 樣品準備:

麵包冷卻 1 小時後,裝入雙層袋中,並在室溫下保存,直到進一步測試。麵包通常在烘焙後的第 1、3 和 7 天進行測試。在每個測試日期,每個變數分別切片 2 個麵包 (使用標準麵包切片機,確保切片厚度為 1/2 英吋)並進行測量。兩端的前三片不參與測試。每次測量堆疊兩片麵包。盡量將每條麵包分別進行 6 次測量,即每個變數每天共進行 12 次測量。

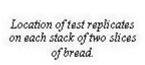

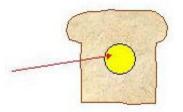

#### 計算項目:

図最大正力

### 結果:

每次測量時,記錄最大峰值力,並計算十二次測量的平均值和標準差。

# 備註:

- 本方法源自於一系列使用質構分析儀測試常見烘焙產品質構的程序。這些程序由美國烘焙協會 (AIB) 位於 堪薩斯州曼哈頓的實驗烘焙實驗室開發並投入使用。
- AIB 研究人員的理念是發展極為靈活的質構測試方案。烘焙產品的種類和形狀多種多樣,因此,有意義的質構比較必須考慮不同的產品幾何形狀。這些測試程序通常透過將產品尺寸縮小到公分母來處理幾何形狀的差異。
- 通常,大多數此類測試的目標是測量烘焙產品的硬度和保質期。由於這些方案主要涉及樣品處理,因此如果測試目標不同(例如彈性、黏結性、回彈性等),可以且應該對其進行略微修改。
- 這些方案只是開發適合您自己產品的測試方法的起點。研究人員應該能夠輕鬆地修改樣品處理方案、測試速度和距離,以適應任何特定目的。